

USO ADEQUADO DO VITALITY

- Distância correta de 0,5 cm;
- Realize sessão teste, irradiando a luz em uma pequena área;
- Respeitar o tempo de aplicação e a entrega de energia (joules);
- Respeitar a frequência de aplicações;
- Não associar a luz a produtos que não realizam a permeação, principalmente coloridos, que bloqueiam a passagem da luz.
- Respeitar as contraindicações e restrições do paciente;
- Se houver dúvidas, procurar um médico e solicitar liberação para os tratamentos;
- Reavaliar o tratamento a cada sessão, ouvir seu paciente e suas necessidades.
- Aprenda a montar seus protocolos de acordo a necessidade de cada paciente. Para isso, faça uma **avaliação e análise minuciosas**.



Terapia Capilar

REV. 00- 08/09/2025

Cores de LED

ÂMBAR

- Ação anti-inflamatória;
- Estimula a produção de colágeno e elastina e a regeneração tecidual;
- Aumenta a densidade dos fios e a resistência da fibra capilar.

VERDE

- Ação antioxidante;
- Modulação do estresse oxidativo, proteção contra danos, ajuda na homeostase, promovendo saúde no crescimento capilar;
- Corrige danos nas células capilares.

AZUL

- Prolonga a fase anágena;
- Ação bactericida e fungicida – descontaminação do tecido;
- Hidratação – barreira hidrolipídica;
- Regeneração tecidual – **estimula células-tronco e reparo no DNA**;
- Apoptose celular – elimina células danificadas.

VERMELHA

- Aumenta o fluxo sanguíneo;
- Elimina toxinas e resíduos metabólicos indesejados;
- Fortalece os folículos, reduzindo a fragilidade dos fios e promovendo a resistência.
- Produção de colágeno e elastina;
- Modulação de inflamações.



TÉCNICAS DE APLICAÇÃO




Aplicação pontual

É aquela na qual o aplicador está em contato direto com a pele e a aplicação é feita concentrando toda a energia no ponto de contato da fonte de luz com o tecido tratado.



Terapia em varredura

É a técnica na qual "varremos" com o LED a área a ser tratada a partir do momento que delimitamos esta área com a aplicação prévia da técnica pontual. Como a energia aplicada não está sendo concentrada em somente um ponto do tecido, e sim em uma área maior, é necessário maior tempo de aplicação para se conseguir depositar a quantidade de energia desejada no tecido.

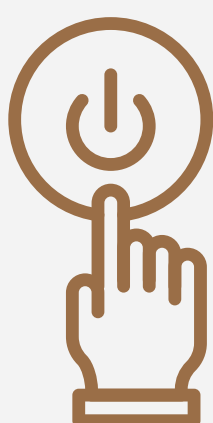

Terapia em ponto-gatilho/ trigger point (TP)

É um pequeno ponto de tensão que pode gerar dor. É recomendada a aplicação do LED em contato direto e, se possível, com uma ligeira pressão, considerando que quanto mais se afasta a luz do ponto de aplicação, mais reflexão haverá.

Fases do crescimento capilar

Fase 1 – Anágena: de 2 a 6 anos – período de crescimento do cabelo.

Fase 2 – Catágena: Transição em um período de 2 a 3 semanas – redução da síntese de melanina e proteínas (pausa no crescimento – menos de 1% do cabelo).


Fase 3 – Telógena: de 1 a 5 meses – o pelo é empurrado para fora (10 a 15% de queda capilar).

À medida que envelhecemos, esse ciclo pode ser interrompido, levando ao afinamento e perda dos fios, o que também pode ocorrer por condições fisiológicas: gravidez, estresse, dietas inadequadas, distúrbios endócrinos, deficiências vitamínicas, entre outras.

Fases adicionais

Exógena: desprendimento do cabelo no início da fase anágena (nova fase).

Kenógena: vazio do folículo piloso antes de iniciar um novo ciclo (característico em alopecia androgenética).

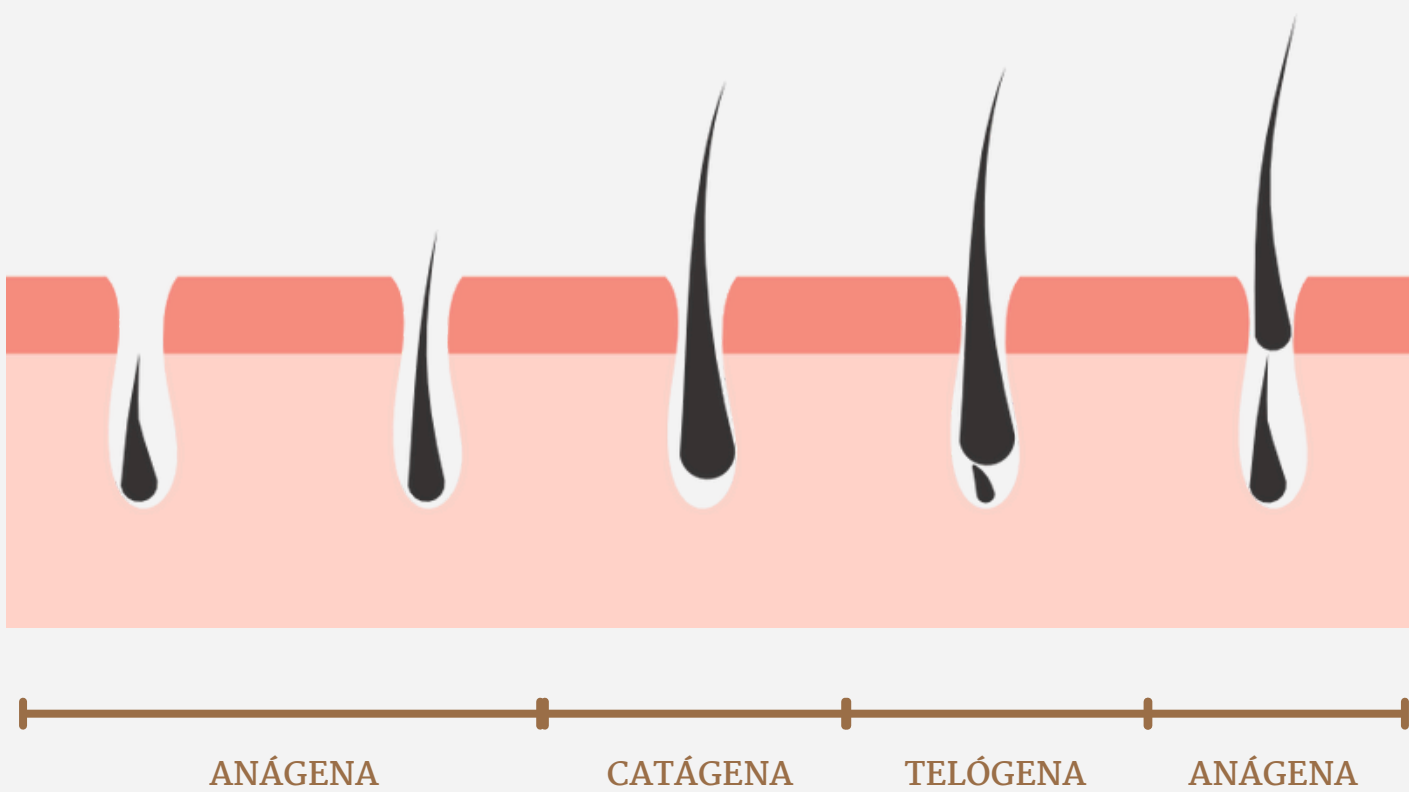

Fototerapia no tratamento capilar

ESTÍMULO AO FOLÍCULO CAPILAR

Estimula a fase anágena, interrompendo a fase telógena. Prolonga a fase anágena e inibe a fase catágena, reduz processos inflamatórios, resultando no crescimento saudável e prolongado, aumentando a densidade dos fios.

Através da absorção da luz, pelos cromóforos presentes nas células, é desencadeada uma série de reações bioquímicas que promovem:

- Reparação celular;
- Redução de inflamações;
- Estímulo de crescimento.


MECANISMO DE AÇÃO

Quando a luz é absorvida pelos cromóforos, ela aumenta a produção de ATP, principal fonte de energia para as células, levando ao aumento de:

- Atividade celular;
- Regeneração tecidual;
- Circulação sanguínea;
- Oxigenação tecidual.

Além disso:

- Reduz o estresse oxidativo;
- Eleva a síntese de proteínas e o crescimento de novos fios, liberação de óxido nítrico, estímulo de angiogênese: faz com que os folículos capilares recebam nutrientes e oxigênios essenciais para o crescimento, de forma adequada;
- Prolonga a fase anágena;
- Ativa o metabolismo das células-tronco, migrando para a papila dérmica;
- Aumenta a produção de ATP – **FORMAÇÃO DE NOVOS FOLÍCULOS CAPILARES.**

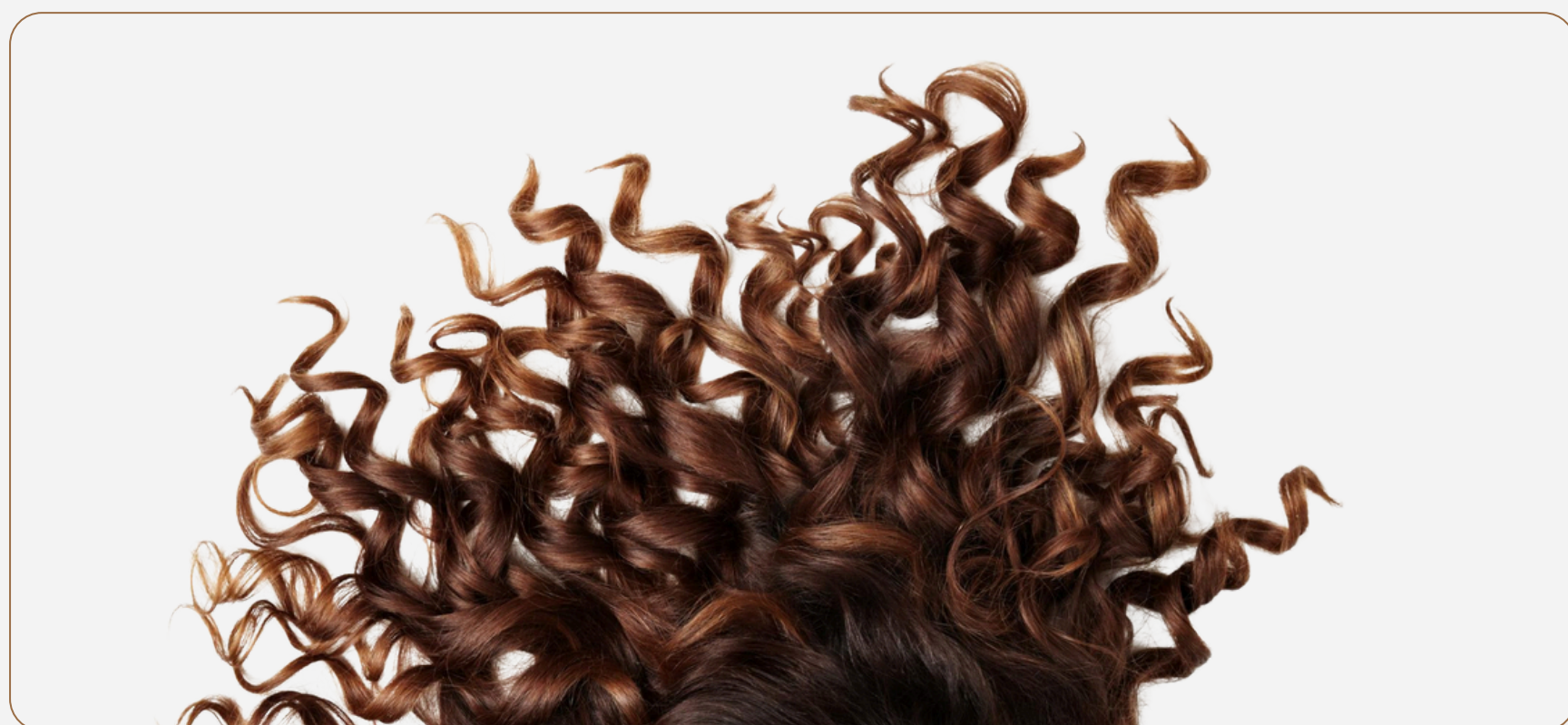


A luz de LED atua na matriz da papila dérmica, estimulando e multiplicando células de fatores de crescimento, como a queratina e a melanina.

Na **derme**, a luz age diretamente no bulge, multiplicando as células e aumentando a migração e velocidade das células para papila dérmica na matriz, resultando em uma fibra capilar mais grossa e com mais melanina, o que estimula a formação de mais fibras capilares no mesmo folículo.

Na **epiderme**, a luz estimula formação de novos folículos capilares.

Na fase telógena, os adipócitos subcutâneos liberam moléculas que inibem células do bulge, deixando as células-tronco mesenquimais (**CÉLULAS QUE DARÃO ORIGEM AOS MELANÓCITOS, QUERATINÓCITOS, FIBROBLASTOS, ADIPÓCITOS, GLÂNDULAS SEBÁCEAS**) estacionadas.

Com a fototerapia, ativam-se os fibroblastos, liberando moléculas que ativam as células tronco mesenquimais, levando ao crescimento capilar.

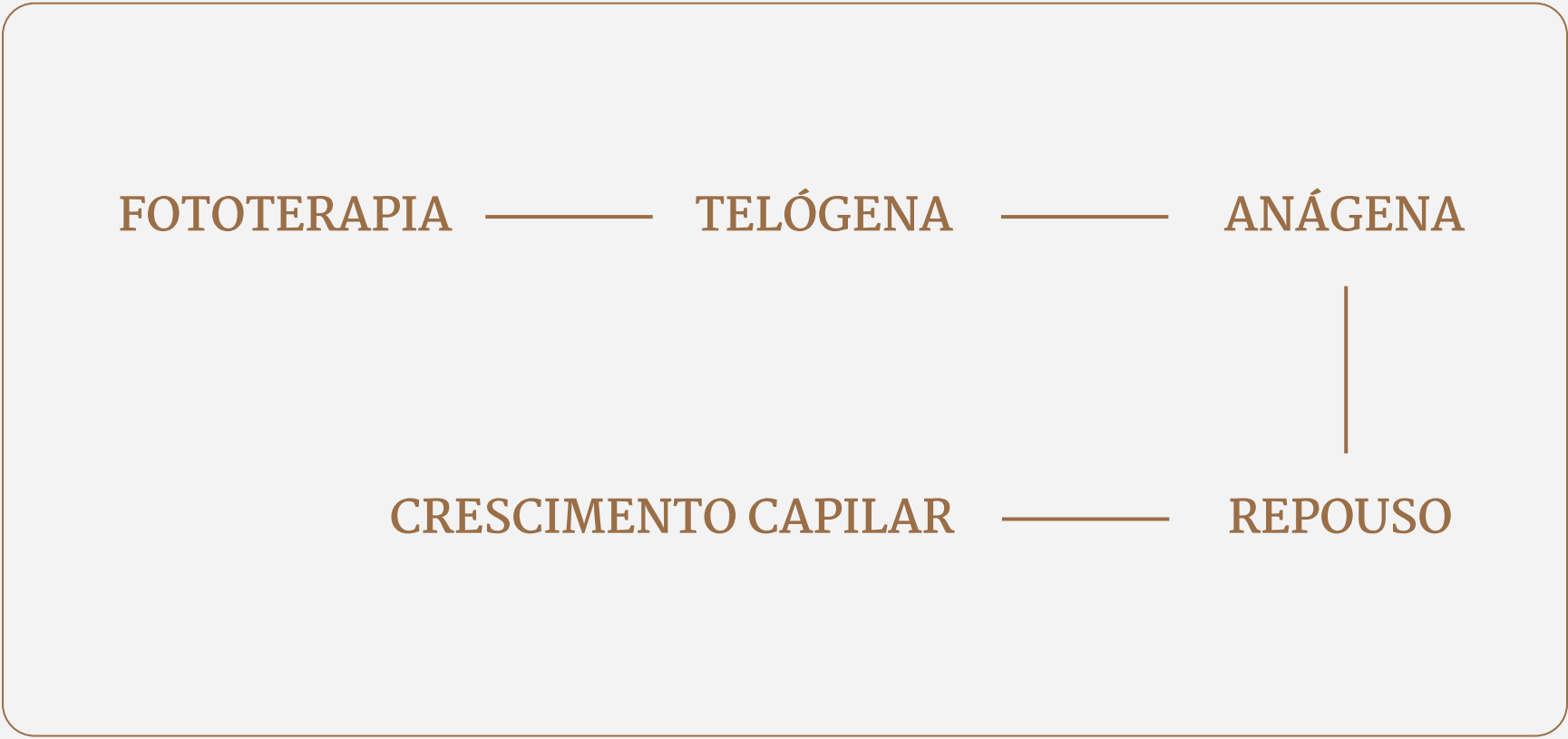

Fototerapia no tratamento capilar

TRATAMENTOS

Na **ficha de anamnese**, analisamos:


- Fototipo;
- Patologias e suas causas, histórico e pré-disposição genética;
- Doenças autoimunes;
- Estresse, ansiedade, depressão;
- Medicamentos;
- Inflamações;
- Infecções;
- Lesões;
- Alimentação (ingestão adequada de água e nutrientes);
- Consumo de álcool;
- Tabagismo, drogas lícitas e ilícitas;
- Atividade física;
- Histórico de anemia, diabetes, tireoide;
- Vitaminas e hormônios (solicitar exames médicos).

FOTOTIPO

Fototipos altos têm produção acentuada de melanina, levando a uma barreira maior no tecido:

- Maior proteção e menor absorção da luz
- Usar dosagem segura e manter distância adequada, evitando queimar o tecido.
- Maior número de sessões.

Peles claras recebem de forma mais facilitada a luz (menor barreira de proteção da melanina).

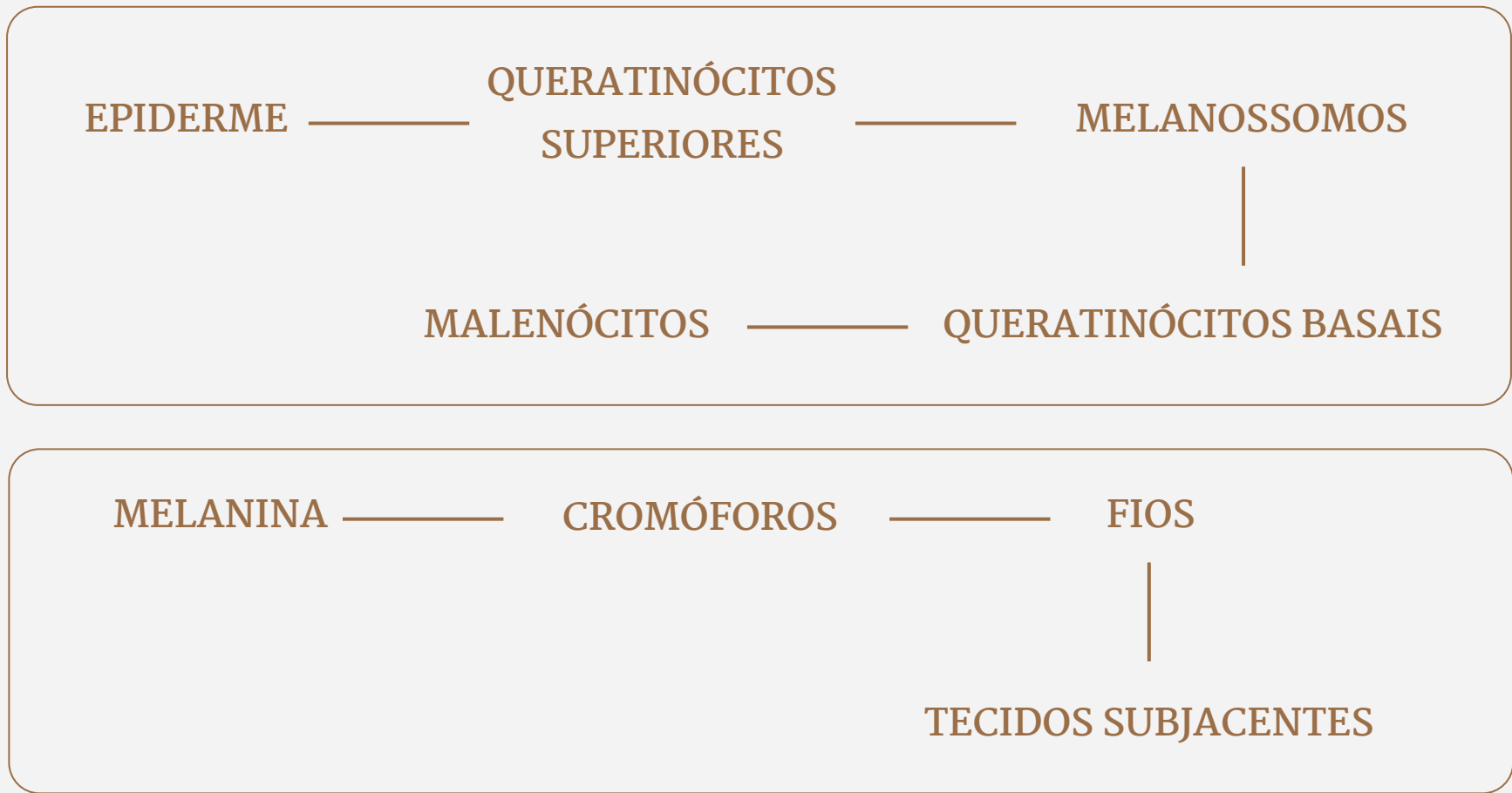

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS

Reavaliar o caso, determinar protocolo de acordo com a necessidade:

- Fase inflamatória – modular inflamação;
- Fase de estímulo – estimular células;
- Fase de supressão – inibir células.

TEMPO ESTIPULADO PARA TRATAMENTOS NA ÁREA CAPILAR

- 3 vezes por semana;
- Por 25 semanas.

A absorção da luz depende do ambiente receptor: se há inflamação ou se o tecido está saudável, se há presença de metais pesados, entre outros fatores.

É indispensável realizar o tratamento com os cabelos limpos, lavados com xampu detox, capazes de remover resíduos, sujidades, oleosidade e selar metais pesados.

Disruptor endócrino: substância química que interfere no sistema endócrino, que é responsável pela produção e regulação dos hormônios no corpo. Podem ser inibidos e não realizar ligações hormonais regulares, devido a:

- **Uso de plásticos em contato com alimentos;**
- **Alimentos com altos níveis de agrotóxicos;**
- **Cosméticos e produtos de higiene pessoal com ingredientes irregulares e prejudiciais** – optar por produtos com rótulos claros e informações sobre a composição;
- **Pesticidas.**

O QUE É NECESSÁRIO PARA APLICAR A TERAPIA CAPILAR?

CONTRAINDICAÇÕES

- Catarata e glaucoma;
- Dermatose causada ou agravada pela luz;
- Gestantes;
- Dermatoses pré-cancerosas;
- Epilepsia;
- Estado febril ou doenças infecciosas ativas;
- Hipersensibilidade à luz na área do tratamento.

AVALIAÇÃO

Preencher ficha de anamnese, solicitar exames de vitaminas (falta de vitaminas e minerais irão reduzir ou anular a eficácia do tratamento). Ex.: Deficiência de vitamina D, do complexo B e ferro, ausência de cromóforos, que diminuem os níveis de absorção das luzes.

Fios e couro cabeludo sempre limpos, lavados de preferência com xampu detox.

TÔNICO CAPILAR

Sobre o couro cabeludo e fios úmidos

FATOR DE CRESCIMENTO/ANTI-INFLAMATÓRIO

produto fototransparente, fotossensível ou fotoativado.

- IGF-1 (Insulin-like Growth Factor)
- VEGF;
- Capixyl™ (Acetyl tetrapeptide-3 + Trifolium pratense);
- Biotinoyl Tripeptide-1;
- Redensyl®.

OBSERVAÇÕES

Estimulam o crescimento folicular, prolongam a fase anágena e reduzem a inflamação.

RECOVER

Sessões que intercalam o tratamento.

ÓLEOS ESSENCIAIS

Lavanda e “canabidiol-like” (inalar) são exemplos de óleos que irão diminuir níveis de estrogênio e aumentar níveis de progesterona e testosterona.

Protocolos de Fototerapia

OBSERVAÇÃO:

Na fototerapia, deve-se evitar a irradiação em feridas infectadas (exsudato purulento). Nesse caso, a técnica indicada é a PDT.

Alopecia androgenética (AAG)

Homens: afinamento do cabelo no topo da cabeça.

Mulheres: afinamento difuso sobre o couro cabeludo.

A di-hidrotestosterona (DHT) desempenha um papel crucial. O DHT é um derivado da testosterona e, em pessoas geneticamente predispostas, pode causar o encolhimento dos folículos capilares, encurtando o ciclo de crescimento do cabelo e levando à queda gradual dos fios. O DHT encurta a fase anágena e prolonga a fase telógena, resultando em um cabelo mais fino e fraco.

É importante diferenciar a AAG de outras causas de perda de cabelo, como o eflúvio telógeno (queda de cabelo temporária devido a estresse ou outras condições) ou a alopecia cicatricial (perda de cabelo causada por inflamação e cicatrizes).

TRATAMENTO

Reduzir os níveis de DHT e retardar a progressão da queda de cabelo.

- Aumento da densidade dos fios;
- Aumento de proliferação do bulbo capilar;
- Diminuir níveis de estrogênio;
- Aumentar níveis de progesterona e testosterona;
- Diminuir níveis de inflamação;
- Aumentar níveis de energia através da ATP.



PROTOCOLO

Fase inflamatória – pontualmente

- Lavar – xampu detox;
- 2 J de luz azul;
- Fator anti-inflamatório;
- 4 J de luz vermelha;
- 5 J de luz âmbar.

Estímulo de crescimento – pontualmente

- Lavar – xampu detox;
- 2 J de luz azul;
- Fator de crescimento;
- 2 J de luz vermelha – pontual.

FREQUÊNCIA

3 sessões por semana

HOME CARE

Espermidina Ellementti

Pode ser intercalado com sessões de microagulhamento, injetáveis, hidratação e peeling antioxidante.

Alopecia por tração

Perda de cabelo causada pela tensão repetida no couro cabeludo, geralmente devido a penteados apertados como tranças, rabos de cavalo e apliques. Essa tração constante pode danificar os folículos capilares, levando à queda de cabelo, especialmente nas áreas frontal e lateral do couro cabeludo.

- **Perda de cabelo:** Especialmente nas áreas onde os penteados exercem mais tensão.
- **Vermelhidão e inflamação:** O couro cabeludo pode ficar irritado e sensível.
- **Dor ou coceira:** Algumas pessoas podem sentir dor ou coceira na área afetada.
- **Cabelos finos e quebradiços:** O cabelo pode ficar mais fino e fraco nas áreas onde há mais tração.



PROTOCOLO

Vermelhidão, coceira, dor – pontualmente

- Lavar – xampu detox;
- 2 J de luz azul;
- 2 J de luz verde;
- Fator anti-inflamatório;
- 4 J de luz vermelha;
- 5 J de luz âmbar.

Fios finos e quebradiços – REDENSIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

- Lavar – xampu detox;
- 15 J de luz azul – varredura (abrir cutícula do fio);
- Fator de crescimento: Cafeína, óxido de diaminopirimidina (Kopexil ou Aminexil), Pichia minuta, Biotinoyl Tripeptide-1, Copper Tripeptide-1, Copper Tripeptide-2;
- 2 J de luz vermelha – couro cabeludo pontualmente

FREQUÊNCIA

3 sessões semanais

HOME CARE

Espermidina Ellementti

Pode ser intercalado com sessões de microagulhamento, injetáveis, hidratação e peeling antioxidante.

Cabelos danificados e ressecados

PROTOCOLO

- Lavar – xampu detox;
- 5 J de luz vermelha – varredura;
- 15 J de luz azul – varredura;
- 5 J de luz âmbar – varredura.

FREQUÊNCIA

Aplicação quinzenal.

HOME CARE

Xampu detox e hidratação 1 a 2 vezes na semana



Pós-química

PROTOCOLO

- Máscara de argila branca, com copaíba, extrato de goiaba, óleo essencial de alecrim e hortelã;
- Agir por 15 a 20 minutos;
- Lavar e remover todos os resíduos;
- 15 J de luz azul – varredura.

FREQUÊNCIA

Procedimento único feito após procedimento de química

HOME CARE

Xampu detox e hidratação de 1 a 2 vezes na semana



Clareamento com pó descolorante

PROTOCOLO

- Lavar – xampu detox;
- Aplicar o descolorante;
- 8 J de luz azul – varredura (fazer pausas para avaliar, e aplicar 8 J de luz azul novamente até atingir a coloração desejada);

De acordo com o percentual do descolorante e fios mais delicados, pode-se dividir a dosagem de energia (joules) e avaliar durante a irradiação da luz. **Pode ser associado ao protocolo de hidratação.**

FREQUÊNCIA

Não se aplica.

HOME CARE

Não se aplica.



Transplante capilar

PROTOCOLO (PRÉ PROCEDIMENTO)

- Xampu detox;
- 2 J de luz azul;
- 2 J de luz vermelha;
- 2 J de luz âmbar.

FREQUÊNCIA

2 vezes por semana para evitar intercorrências

PROTOCOLO (PÓS TRANSPLANTE 1º AO 5º DIA)

- Xampu neutro hipoalergênico;
- 1 J de luz azul;
- 4 J de luz vermelha.

FREQUÊNCIA

1 vez ao dia

PROTOCOLO (PÓS TRANSPLANTE A PARTIR DO 6º DIA)


- Xampu neutro hipoalergênico;
- 1 J de luz azul;
- 2 J de luz vermelha;
- 2 J de luz âmbar.

FREQUÊNCIA

1 vez ao dia

OBSERVAÇÃO:

Luz azul sempre em dosagem baixa, prevenção ao efeito rebote e sobrecarga de energia, evitando alta liberação de radicais livres, ressecamento e inflamação.

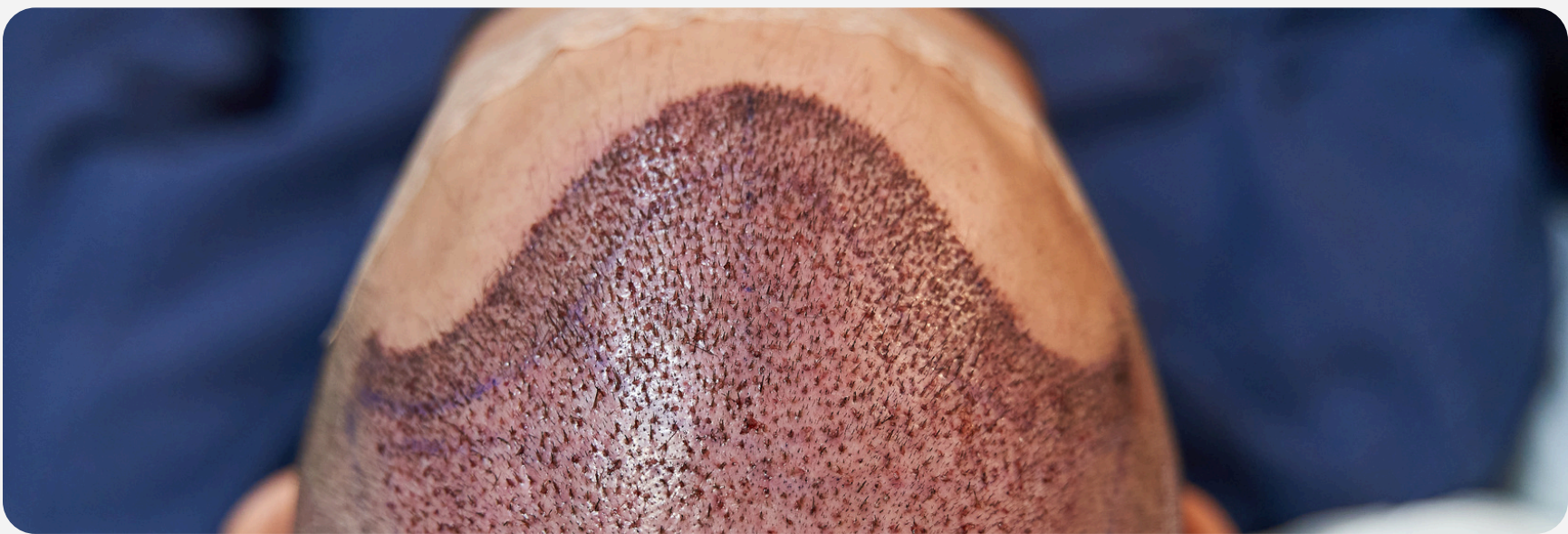

Microagulhamento e injetáveis

PROTOCOLO

- Lavar – xampu detox;
- 2 J de luz azul – pontual (descontaminação do tecido, assepsia e hidratação);
- 5 J de luz verde – pontual (proteção à hiperpigmentação pós-inflamatória);
- Fator de crescimento, como cafeína, óxido de Diaminopirimidina (Kopexil ou Aminexil), Pichia minuta, Biotinoyl Tripeptide-1, Copper Tripeptide-1, Copper Tripeptide-2;
- Realizar a técnica sem gerar processo inflamatório, somente permeação (ex.: para microagulhamento, agulha de 0,25 mm).
- 4 J de luz vermelha – pontual;
- 2 J de luz âmbar – pontual.

FREQUÊNCIA

Aplicação quinzenal.

HOME CARE

Fator de crescimento e tônico



Modulação de inflamação & cicatrização

PROTOCOLO

- Lavar – xampu detox;
- 2 J de luz azul;
- Fator de crescimento;
- 2 J de luz vermelha.

Pode ser intercalado com sessões, duas vezes na semana para hidratação e estímulo de crescimento.

FREQUÊNCIA

Aplicação quinzenal.

HOME CARE

Não se aplica.



Peeling antioxidante & Recover

Anti-inflamatório, hidratante gerenciador de radicais livres – FOTOATIVADO

PROTOCOLO

- Lavar – xampu detox;
- Fotoativo: Curcumina, ácido lactobiônico 8% ou gluconolactona 20%;
- 5 J de luz azul – pontual (baixa liberação de radicais livres e permeação de ativos);
- Vitamina C.

FREQUÊNCIA

Não se aplica.

HOME CARE

Não se aplica.



Rosácea

Rosácea é uma condição cutânea crônica que pode afetar o couro cabeludo, causando vermelhidão, descamação, inchaço e, em alguns casos, queda de cabelo.

1. Modular a inflamação;
2. Reforçar a barreira de proteção da pele;
3. Modulação microbiana.

PROTOCOLO

- Lavar – xampu detox;
- 1 J de luz azul – pontual (descontaminação do tecido, assepsia, ação bactericida e hidratação);
- 2 J de luz verde – pontual (ação fotoprotetiva, “FPS-like”) – combate a vermelhidão, queimação e inchaço);
- Água prebiótica;
- 4 J de luz vermelha – pontual (modulação de inflamação, coceira e caspa);
- 5 J de luz âmbar – pontual (modulação de inflamação, coceira e caspa).

FREQUÊNCIA

3 vezes por semana.

OBSERVAÇÃO:

O protocolo pode ser intercalado com peeling antioxidante.
Se houver queda, recomenda-se protocolo para estímulo de crescimento capilar.
Não se aplica home care.



Psoríase

Psoríase é uma doença inflamatória crônica que se manifesta no couro cabeludo, causando lesões avermelhadas, descamação, inflamação, coceira, queimação e queda de cabelo.

1. Modular a inflamação;
2. Reforçar a barreira de proteção da pele;
3. Modulação microbiana.

PROTOCOLO

- Lavar – xampu detox;
- 1 J de luz azul – pontual (descontaminação do tecido, assepsia, ação bactericida e hidratação);
- 2 J de luz verde – pontual (ação fotoprotetiva, “FPS-like”) – combate a vermelhidão, queimação e inchaço);
- Água prebiótica;
- 4 J de luz vermelha – pontual (modulação de inflamação, coceira e caspa);
- 5 J de luz âmbar – pontual (modulação de inflamação, coceira e caspa).

FREQUÊNCIA

3 vezes por semana.

OBSERVAÇÃO:

O protocolo pode ser intercalado com peeling antioxidante.
Se houver queda, recomenda-se protocolo para estímulo de crescimento capilar.
Não se aplica home care.



Dermatite e Dermantite Seborreica

Dermatite ou **dermatite seborreica** causam descamação, vermelhidão, coceira e caspa.

1. Modular a inflamação;
2. Reforçar a barreira de proteção da pele;
3. Modulação microbiana.

PROTOCOLO

- Lavar – xampu detox;
- 1 J de luz azul – pontual (descontaminação do tecido, assepsia, ação bactericida e hidratação);
- 2 J de luz verde – pontual (ação fotoprotetiva, “FPS-like”) – combate a vermelhidão, queimação e inchaço);
- Água prebiótica;
- 4 J de luz vermelha – pontual (modulação de inflamação, coceira e caspa);
- 5 J de luz âmbar – pontual (modulação de inflamação, coceira e caspa).

FREQUÊNCIA

3 vezes por semana.

OBSERVAÇÃO:

O protocolo pode ser intercalado com peeling antioxidante.
Se houver queda, recomenda-se protocolo para estímulo de crescimento capilar.
Não se aplica home care.



Controle de oleosidade e equilíbrio hidratante

Aplicação pontual.

PROTOCOLO

- Lavar – xampu detox
- 2 J de luz azul;
- 3 J de luz verde;
- 4 J de luz vermelha;
- 5 J de luz âmbar.

FREQUÊNCIA

Aplicação quinzenal.

HOME CARE

Limpeza com xampu detox.



DICAS E SUGESTÕES

Realize a programação dos tratamentos de seu paciente, explicando o tempo necessário para cada patologia, com base nas informações sobre ciclo capilar, inflamações, crescimento, utilização de home care, patologias, medicações e resposta individual ao tratamento.

Monte pacotes completos, sessões indispensáveis de hidratação, controle de oleosidade, antioxidação, modulação de inflamações, estímulo de crescimento e sessões de manutenção.

Use o LED como diferencial em seus tratamentos e cobre por ele. Mostre as vantagens de um tratamento completo, venda a solução para a dor do seu paciente.

Associe o LED em procedimentos químicos, como progressiva, tintura, evitando queda, afinamento, ressecamento. Eleve procedimentos simples a tratamentos completos e de qualidade.

Disfunções capilares não são apenas sobre cabelo, mas sobre autoestima, bem-estar, saúde e estética. Assim como a pele, o cabelo é a maquiagem natural, que reflete a beleza da alma. Faça seu paciente se sentir acolhido e demonstre cuidado ao tratar cada pessoa, de forma humana e personalizada.

FICHA DE ANAMNESE E RECOMENDAÇÃO/RECEITUÁRIO

Manter uma ficha de registro do seu paciente mostra a seriedade do seu trabalho e agrega valor aos seus procedimentos. Realize consultas, consultorias e recomendações personalizadas.

EXEMPLO DE CARTA DE RECOMENDAÇÃO

Na próxima página, fizemos um modelo para você utilizar!

CARTA DE RECOMENDAÇÃO

NOME DO PACIENTE:	
IDADE:	
PATOLOGIA:	
PROGRAMAÇÃO DO TRATAMENTO:	
ORIENTAÇÕES:	
HOME CARE:	
HÁBITOS SAUDÁVEIS:	
ALIMENTAÇÃO:	
HIGIENIZAÇÃO:	
SUPLEMENTAÇÃO:	

_____/_____/_____

Assinatura
(profissional)

Hábitos e histórico familiar	<i>sim</i>	<i>não</i>
Se expõe ao sol com frequência?	☐	☐
Consome alimentos de alto índice glicêmico (açúcar, gordura, carboidrato)?	☐	☐
Ingere água com frequência?	☐	☐
Boa qualidade do sono?	☐	☐
Pratica atividade física?	☐	☐
Utiliza filtro solar?	☐	☐
Funcionamento intestinal regular?	☐	☐
Tabagismo?	☐	☐
Ingere bebida alcóolica?	☐	☐
Irritações na pele?	☐	☐
Possui algum tipo de alergia?	☐	☐
Está tomando algum medicamento?	☐	☐
Utiliza anticoncepcional?	☐	☐
Está no período menstrual?	☐	☐
Gestante?	☐	☐
Histórico de câncer na família?	☐	☐
Histórico de doença crônica na família?	☐	☐

Doenças e tratamentos	<i>sim</i>	<i>não</i>
Alterações cardíacas?	☐	☐
Portador de marcapasso?	☐	☐
Febre?	☐	☐
Doenças infecciosas?	☐	☐
Hanseníase	☐	☐
Problemas de pele?	☐	☐
Dermatose pré cancerosa?	☐	☐
Dermatose causada ou agravada pela luz?	☐	☐
Câncer?	☐	☐
Possui doença aguda ou crônica?	☐	☐
Catarata ou glaucoma?	☐	☐
Epilepsia?	☐	☐
Possui prótese facial?	☐	☐
Possui prótese corporal?	☐	☐
Tratamento facial anterior? Se sim, qual?	☐	☐
Já utilizou Roacutan?	☐	☐
Está fazendo algum tratamento simultâneamente?	☐	☐

Lesões	<i>sim</i>	<i>não</i>
Comedões (cravos)	☐	☐
Pústulas (espinhas)	☐	☐
Nódulos (espinha interna)	☐	☐
Milium (pequenos cistos)	☐	☐
Dermatite	☐	☐
Rosácea	☐	☐
Psoríase	☐	☐
Alopécia	☐	☐

Cicatriz	<i>sim</i>	<i>não</i>
Óstios abertos	☐	☐
Cicatriz hipertrófica	☐	☐
Cicatriz queloidiana	☐	☐
Queimaduras	☐	☐

Dano capilar	<i>sim</i>	<i>não</i>
Pós-química (descreva)	☐	☐
Oleosidade (seco ou oleoso?)	☐	☐

Hipercromias (muita pigmentação)	<i>sim</i>	<i>não</i>
Melasma	☐	☐
Pós-inflamatória	☐	☐
Eférides	☐	☐
Cloasma	☐	☐
Melanose solar	☐	☐
Acantose nigricans	☐	☐

Fenótipo de pele	<i>sim</i>	<i>não</i>
Tipo 1	☐	☐
Tipo 2	☐	☐
Tipo 3	☐	☐
Tipo 4	☐	☐
Tipo 5	☐	☐
Tipo 6	☐	☐


Biotipo de pele	<i>tipo</i>
Alípica (seca)	☐
Lipídica (oleosa)	☐
Normal	☐
Pele mista	☐

Espessura	<i>tipo</i>
Muito fina	☐
Fina	☐
Grossa	☐
Muito grossa	☐


Grau de envelhecimento	<i>tipo</i>
Leve	☐
Moderado	☐
Avançado	☐
Severo	☐

OBSERVAÇÕES:



VISÃO SUPERIOR

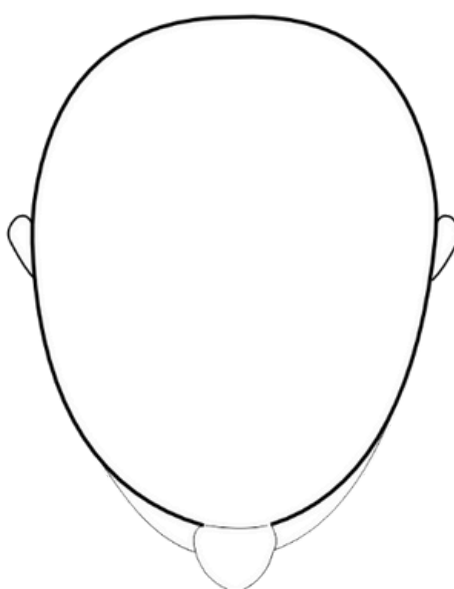


VISÃO LATERAL ESQUERDA

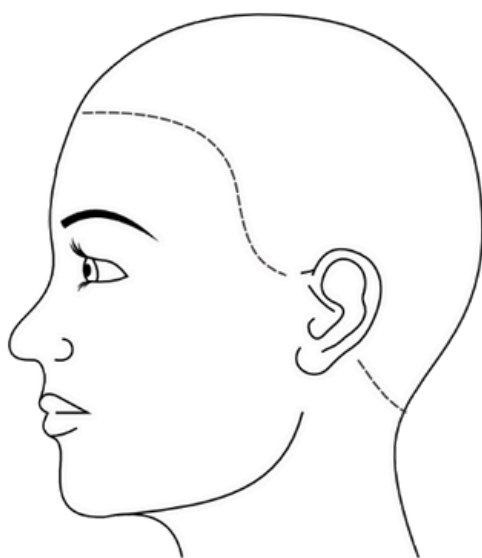

VISÃO LATERAL DIREITA

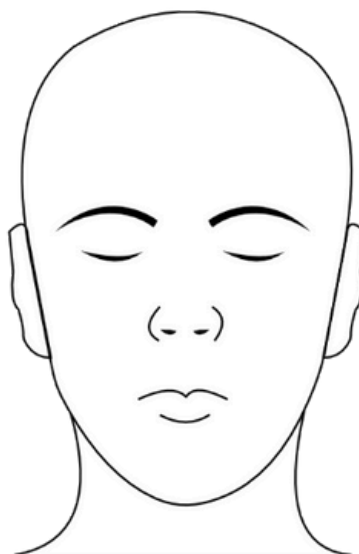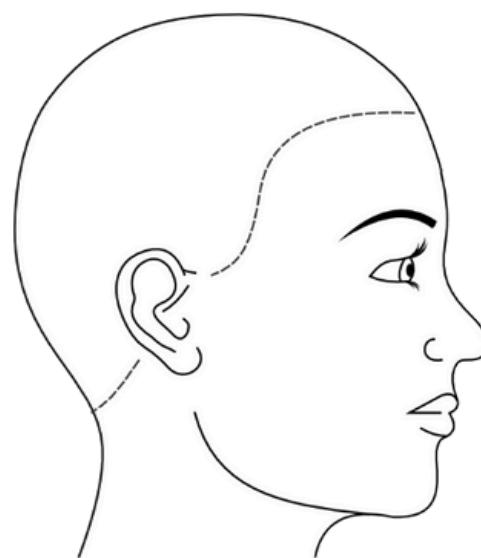

VISÃO FRONTAL

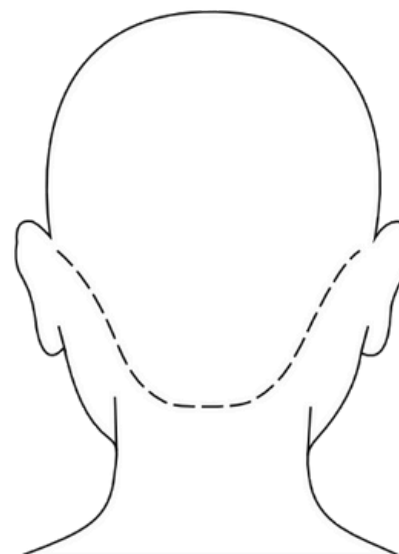

VISÃO TRASEIRA

Terapia Capilar

REV. 00 - 10/09/2025